

1C10 Terion

1 Alumínium adapter

Könnyű és tartós.

2 Karbonszálás rugó

A karbonszálás rugó nagy stabilitást biztosít a protézisláb elülső részének. A sarokra lépéskor elnyelt energia nagy része eltárolódik, majd az átgördülést megkönnyítendő, visszakerül a rendszerbe. A különálló nagylábujj képes alkalmazkodni az egyenetlen talajviszonyokhoz a biztonságos állás és járás érdekében.

3 Habtalp

A lágy habból készült talp kényelmessé és biztonságossá teszi a sarokra érkezést. Járás során harmonikus átgördülést, valamint mérsékelt rugalmasságot biztosít minden irányba.




Az 1C10 Terion a mérsékelt aktivitású felhasználók számára is elérhetővé teszi a karbonszálás anyagok előnyeit (kis súly, rugalmasság, tartósság). Használhatják a MOBIS®, az Ottobock mobilitásrendszere alapján a 2. és 3. mobilitásfokú, azaz korlátozott kültéri, és korlátozás nélküli kültéri használatra képes amputáltak.

Az anatómiailag formázott rugalmas sarokrésszel és a részben osztott karbonszálás rugóval ellátott, letisztult formavilágú protézisláb nagy dinamikával és energia-visszaadó képességgel támogatja a felhasználót a hétköznapi során.



max. 75 kg
22–23 méret

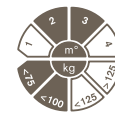

max. 100 kg
24–25 méret



max. 125 kg
26–28 méret

Előnyök

- Könnyű, erős és tartós karbonszálás protézisláb
- Ellenáll a pornak, szennyeződésnek és a felgyűrűző víznek.
- A kozmetikai borítás különálló lábujja megnöveli az előláb hosszát, ami gyorsabb járást tesz lehetővé.
- Az alacsony profilú kozmetikai borítás könnyen elérhetővé teszi az állítócsavarokat és kényelmessé teszi a felhelyezést.
- A kozmetikai borításon és a csatlakozó sapkán lévő jelölések megkönnyítik a beállítást.
- Három méretben, két színben, keskeny és normál formában ill. három különböző keménységgel rendelhető.

Műszaki adatok

Aktivitási szint	MOBIS 2 – 3
Max. testsúly	125 kg
Méret	22–28 cm
Kozmetikai borítás	keskeny forma 5 mm sarokmagassághoz (22 – 23 cm) normál forma 5 mm sarokmagassághoz (24 – 28 cm)
Súly (kozmetika nélkül)*	kb. 343 g
Súly normál kozmetikával*	kb. 570 g
Rendszer/ beépítési magasság*	49 mm
Ajánlott térdizületek	3R78, 3R92, 3R106, 3R60

1C10 Terion

Rendelési információ

Az 1C10 Terion protézisláb az oldaliság figyelembevételével rendelhető kozmetikával (1), vagy a protézisláb és a kozmetikai borítás külön-külön is (2, 3) kétféle színű kozmetikával: beige (4) és világosbarna (15) színekben.

Keményység kiválasztása

Méret	Méret		
	Kis méret	Közepes méret	Nagy méret
Testsúly	22–23 cm	24–25 cm	26–28 cm
75 kg-ig	2-es Keménység	3-as Keménység	4-es Keménység
76–100 kg			
101–125 kg			

● Keskeny kozmetikával ● Normal kozmetikával

Oldal	Méret [cm]	Szín	Forma
Jobb R	22, 23, ..., 28	Beige	4 22–23 cm S
Bal L		Világosbarna	15 24–28 cm N

1 Rendelési minta kozmetikával

Mennyiség	Cikkszám	=	Oldal	Méret	-	Keményység	-	P	/	Szín	Forma
	1C10	=			-		-	P	/		
	1C10	=			-		-	P	/		
	1C10	=			-		-	P	/		



A megrendelés tartalmazza az 1C10 protézislábat, a 2C12 kozmetikát különálló lábujjval, a 2C13 csatlakozó sapkát és a Spectra zoknit.

2 Rendelési minta kozmetikai borítás nélkül

Mennyiség	Cikkszám	=	Oldal	Méret	-	Keményység	-	P	/	0
	1C10	=	N	22 23	-	2	-	P	/	0
	1C10	=	N	24 25	-	3	-	P	/	0
	1C10	=	N	26 28	-	4	-	P	/	0



A megrendelés tartalmazza az 1C10 protézislábat Spectra zoknival.

3 Rendelési minta kozmetikai borítás

Mennyiség	Cikkszám	=	Oldal	Méret	/	Szín	Forma
	2C12	=			/		
	2C12	=			/		
	2C12	=			/		



A megrendelés tartalmazza a 2C12 kozmetikai borítást különálló lábujjval és a 2C13 csatlakozó sapkát.